

取扱説明書

1.特長

メニわん コーニアルバンデージわん（以下、治療用コンタクトレンズと称す）は、外界からの刺激や乾燥から障害角膜を保護し、強い疼痛をやわらげ上皮再生を促進するバンデージ効果と投与された薬剤（点眼薬）をレンズ内に取り込み障害部に持続的・効果的に放出し薬効を高める役割を持つ「動物用」一般医療機器です。

タイプ		S	M	L
レンズ規格	B.C. 曲率半径	8.60 mm	9.10 mm	9.70 mm
	DIA. レンズの直径	14.2 mm	15.8 mm	17.8 mm
物性値	含水率 (20℃ 0.9%NaCl 水溶液中)	72%		
	酸素透過係数 (ISO法)	$34 \times 10^{-11} (\text{cm}^2 / \text{sec}) \cdot (\text{mLO}_2 / (\text{mL} \times \text{mmHg}))$		
レンズカラー		アクアグリーン		
ドット (青白色)		無	4点	
適応種		猫 超小型犬	小型犬	中型犬 大型犬

- 高含水素材による高いDk値と薄型デザインにより酸素透過性が優れています。
- レンズカラーは、うるおいと優しさを持った「アクアグリーン」です。
- 適度な弾力性による形状保持性があります。

2.治療用コンタクトレンズの効能効果

- ①眼瞼内反症による角膜疼痛の緩和と角膜保護
- ②角膜上皮剥離の緩和
- ③角膜潰瘍の緩和
- ④角膜潰瘍に伴う3mm以下のデスメ膜瘤の緩和
- ⑤結膜弁や角膜移植を行うまでの間の角膜保護、及びこれら移植後の角膜保護
- ⑥難治性角膜上皮ピランにおける遊離上皮切除と多点状角膜切開後の角膜保護
- ⑦猫の鼻気管炎による角膜への結膜癒着を剥離した後の再癒着防止


3.適応が好ましくない症例

- ①径3mmを超えるデスメ膜瘤
- ②融解性角膜炎
- ③乾性角結膜炎
- ④ドライアイ
- ⑤小眼球症
- ⑥眼球癆
- ⑦角膜浮腫
- ⑧ソフトコンタクトレンズにアレルギーのあるもの

4.治療用コンタクトレンズのはめ方

治療用コンタクトレンズをはめる時は、患畜を後ろ側より動かないよう押さえる必要があります。

- ①患畜の眼が涙で十分に潤っていることをご確認ください。
- ②点眼麻酔の必要性をご確認ください。
※治療用コンタクトレンズ装用が有効となる症例では、眼に触れるだけで激しい疼痛を伴うものが多いことから点眼麻酔をした方が装用しやすくなります。
- ③ナイロン鑷子（メニホルダー™）でケースから治療用コンタクトレンズを取り出し、レンズの内面を上にして人差し指にのせます。
この時、治療用コンタクトレンズの表裏が正しくなっていることをご確認ください。
※正常なレンズは凹面から見て周辺部がグリーンにはっきり見えます。
レンズ表裏の区別（装用前には必ず確認してください。）

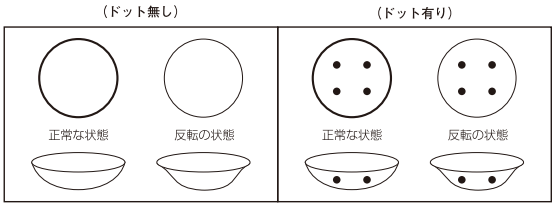

- ④表裏が正しいことを確認された治療用コンタクトレンズを再度ナイロン鑷子（メニホルダー™）でつかみ、もう一方の手の人差し指と親指で患畜のまつ毛の生え際を押さえながら眼瞼を開かせます。
- ⑤治療用コンタクトレンズを角膜中央部へそっとのせます。
- ⑥治療用コンタクトレンズを角膜にのせた後、指で閉瞼・開瞼を数回繰り返し返してください。
※この操作で治療用コンタクトレンズと角膜の間の空気が抜け、瞬膜の下に入ります。
※閉瞼・開瞼を数回繰り返しても空気が抜けない場合は、最初から試みてください。
- ⑦治療用コンタクトレンズ装着後、眼疾患に対しての点眼処方をし、速やかにエリザベスカラーを着用します。

5.治療用コンタクトレンズのはずし方

- ①エリザベスカラーを取り、患畜を後ろ側より動かないように押さえます。
- ②コンタクトレンズをはずす人は、はずす方の手の中指で下眼瞼を下げ、もう一方の手の人差し指で上眼瞼を上げます。この時、まつ毛の生え際を押さえます。
- ③コンタクトレンズをはずす方の手の親指と人差し指の腹の部分でレンズ下方部をつまみはずします。
※このとき、爪がコンタクトレンズに当たったり、眼球に直接指が触れないよう注意してください。

6.取扱い上の注意点

- ①コンタクトレンズがすぐに外れる場合、次のような状態が考えられます。
 - ・レンズと角膜の曲率が大きく違っている。
 - ・角膜が歪んでいる。
 - ・レンズが瞬膜の下に入っていない。
 - ・レンズが裏返しに装着されている。
 - ・涙液量が十分でない。
 - ・エリザベスカラーを装着していない。
- ②一度使用済みのレンズは再装用（再使用）しないでください。



警告
動物用治療用コンタクトレンズです。
ヒト用ではありませんので、ヒトには絶対に使用しないでください。

販売業者：株式会社メニワン  **Meni-One**

〒460-0006 名古屋市中区葵三丁目21番19号
（お問い合わせ先）TEL（052）325-3823

ホームページ | www.meni-one.com

製造販売業者：株式会社メニコンネクト

〒452-0805 名古屋市西区市場木町390番地

31304-04 00000